

DEX™

A WIRELESS WORLD

MODE D'EMPLOI

**LA RADIOCOMMANDE
RC-DEX**

WIDEX®
HIGH DEFINITION HEARING

SOMMAIRE

VOTRE NOUVELLE RADIOCOMMANDE DEX™	4
ACCESSOIRES	7
LA PILE	8
COMMENT CHANGER LA PILE ?	9
COMMENT UTILISER LA RADIOCOMMANDE ?	11
LA PORTEE DE FONCTIONNEMENT	11
LE VOYANT LUMINEUX	11
COMMENT REGLER LE VOLUME ?	12
COMMENT CHANGER DE PROGRAMME ?	13
COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE RADIOCOMMANDE ?	14
MISE EN GARDE	15
PROBLÈMES ET SOLUTIONS	17
INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES	18


VOTRE NOUVELLE RADIOCOMMANDE DEX™

Nous espérons que votre radiocommande pour aide auditive Widex vous donnera entière satisfaction. Ce mode d'emploi vous explique comment la faire fonctionner. Veuillez le lire attentivement avant d'utiliser votre radiocommande.

La radiocommande permet d'accéder facilement aux fonctionnalités de l'aide auditive comme le réglage du volume ou le changement de programme. Elle possède également un voyant lumineux pour une indication visuelle.


VUE FRONTALE

- 1. Voyant lumineux**
- 2. Augmentation du volume**
- 3. Changement de programme**
- 4. Baisse du volume**

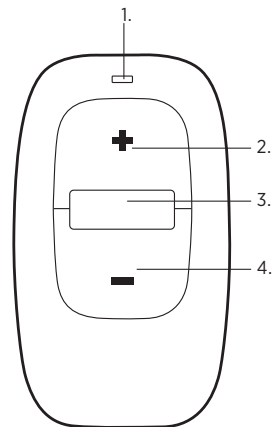


VUE ARRIERE

1. Couverture du logement de la pile
2. Œillet de fixation

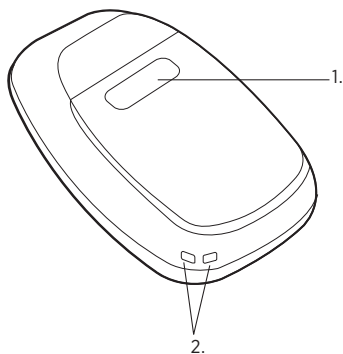

ACCESSOIRES

1. Pile
2. Anneau/cordon de porte-clés
3. Mode d'emploi

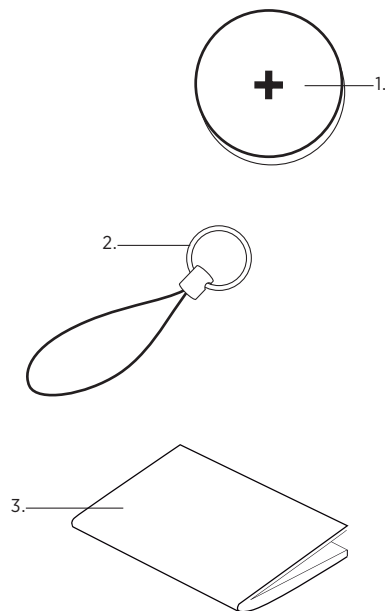

LA PILE


Cette radiocommande est alimentée par une pile **Lithium CR2032**

Si vous avez besoin de piles de rechange, veuillez contacter votre audioprothésiste. Veuillez prendre connaissance, sur l'emballage, de la date d'expiration et des recommandations concernant la mise au rebut des piles usées.



La radiocommande s'allume lorsqu'une pile en état de fonctionner est correctement placée dans le logement de la pile. La durée de vie de la pile est d'environ 12 mois selon l'utilisation de la radiocommande.

COMMENT CHANGER LA PILE ?

1. Oter le couvercle du logement de la pile en le faisant glisser vers le bas.
2. Appuyez sur la pile comme sur l'illustration pour la faire basculer et la retirer.

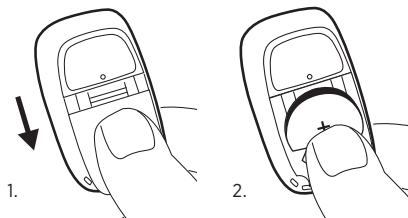

3. Insérez la nouvelle pile diagonalement comme sur l'illustration, puis appuyez dessus pour la mettre convenablement en place. Le signe plus (+) de la pile doit être orienté vers le haut.
4. Remplacez le couvercle du logement de la pile.

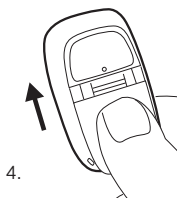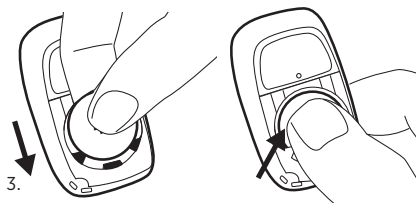

COMMENT UTILISER LA RADIOCOMMANDE ?

La radiocommande vous permet d'actionner discrètement votre aide auditive depuis, par exemple, la poche d'un vêtement ou votre sac à main. La radiocommande possède un œillet de fixation pour porte-clés ou objet semblable.

LA PORTEE DE FONCTIONNEMENT

La portée de fonctionnement de la radiocommande à l'aide auditive est de 1 mètre au maximum.

LE VOYANT LUMINEUX

Un voyant lumineux vert indique qu'une des touches de la radiocommande a été activée.

COMMENT REGLER LE VOLUME ?

Appuyez brièvement sur la touche d'augmentation du volume (+) pour augmenter le volume. Appuyez brièvement sur la touche de diminution du volume (-) pour baisser le volume.

Lorsque vous activerez les touches de volume, vous entendrez un signal sonore bref. Lorsque le niveau de réglage minimum ou maximum est atteint, vous entendrez un signal sonore long.

COMMENT CHANGER DE PROGRAMME ?

A l'aide de votre radiocommande, vous pourrez choisir un programme d'écoute parmi ceux programmés dans votre aide auditive. Appuyez brièvement sur la touche de changement de programme pour changer de programme.

Zen+

Si votre aide auditive possède le programme Zen+, vous pouvez l'activer par une longue pression (2 secondes) de la touche de changement de programme. De brèves pressions de la touche de changement de programme vous permettront ensuite de choisir parmi les harmonies Zen disponibles. Pour retourner au programme d'écoute standard appuyez longuement sur la touche.

COMMENT PRENDRE SOIN DE VOTRE RADIOCOMMANDE ?

La radiocommande est un objet précieux et doit être manipulée avec soin. Vous trouverez ci-dessous quelques conseils qui vous permettront d'en prolonger la durée de vie :

- Ne l'exposez pas à des températures extrêmes ou à une forte humidité.
- Nettoyez la radiocommande avec un petit chiffon doux. Ne lavez jamais votre radiocommande avec de l'eau, des produits de nettoyage ou autres solvants.
- Ne portez pas votre radiocommande sur vous lors d'une radiographie, d'une IRM ou de traitements par rayonnements, et ne placez jamais votre radiocommande dans un four à micro-ondes. Ces types de rayonnements sont des rayonnements qui peuvent endommager votre radiocommande. Cependant, les rayonnements provenant par exemple des équipements des salles de surveillance, des alarmes antivol et des téléphones portables sont plus faibles et n'endommageront pas votre radiocommande.
- N'essayez jamais d'ouvrir ou de réparer votre radiocommande vous-même. (Cela doit être effectué par du personnel habilité uniquement).

MISE EN GARDE

L'ingestion ou l'utilisation inadéquate d'une pile peut être dangereuse. Une ingestion ou une utilisation inadéquate peut entraîner de graves lésions ou même être mortelle. En cas d'ingestion, consultez immédiatement votre médecin.

- Veillez à garder votre radiocommande ainsi que ses accessoires et les piles hors de portée des enfants et de toute personne susceptible d'avaler de tels objets ou de se blesser. Ne changez pas les piles en leur présence et ne leur montrez pas l'endroit où vous les rangez. Jetez soigneusement les piles usées.
- Ne mettez jamais une pile ou une aide auditive dans votre bouche, pour quelle raison que ce soit, car vous risqueriez de l'avaler.
- N'utilisez pas votre radiocommande à bord d'un avion ou dans les hôpitaux sans autorisation préalable.
- N'utilisez pas votre radiocommande dans des mines ou d'autres lieux contenant des gaz explosifs.

- Bien que votre radiocommande ait été conçue conformément aux standards internationaux de compatibilité électromagnétique les plus stricts, la possibilité d'interférence avec d'autres équipements, tels que les appareils médicaux, n'est pas exclue.

AVERTISSEMENT

**Risque d'explosion si la pile est remplacée par un type de pile incorrect ou rechargé.
Mettez les piles au rebut suivant les instructions.**

PROBLÈMES ET SOLUTIONS

Problème	Cause possible	Solution
Votre radiocommande ne fonctionne pas	La pile est épuisée ou ne fonctionne pas	Remplacer la pile
	La pile de votre aide auditive est épuisée	Remplacer la pile
	Hors de la portée de fonctionnement	La déplacer dans la portée de fonctionnement

INFORMATIONS RÉGLEMENTAIRES



Par la présente Widex A/S déclare que l'appareil RC-DEX est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la directive 1999/5/CE.

Vous trouverez une copie de la déclaration de conformité sur : <http://www.widex.com>



Federal Communications Commission and Industry Canada Statement

FCC ID: TTY-RCDEX

IC: 5676B-RCDEX

This device complies with part 15 of the FCC Rules and with RSS-210 of Industry Canada. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

NOTE:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

NOTE:

This equipment complies with FCC radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment. This transmitter must not be co-located or operating in conjunction with any other antenna or transmitter.

This equipment complies with the Industry Canada RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment as per IC RSS-102 Issue 3.

Changes or modifications to the equipment not expressly approved by Widex could void the user's authority to operate the equipment.



Vous ne devez pas jeter les aides auditives, les accessoires et les piles dans les ordures ménagères ordinaires. Veuillez contacter le représentant officiel local de Widex qui vous conseillera sur la façon de vous débarrasser, comme il se doit, de ces objets.

CE 0459

WIDEX A/S • Nymoellevej 6, DK-3540 Lyngø
Denmark • www.widex.com



Imprimé par HTO / 03-10
9 514 0128 003 #01